

初心者向けのカンタン操作

出力パワーが6段階調節可能

個人のお肌状況により自由に出力の強度を調整できます。敏感肌も心配無用。痛みに敏感でない方は強度レベル4~6お勧めします。



※毛が濃い所はカミソリで前処理をしてください。ジェル等を塗る必要はありません。
※美顔モードは顔下半分に、胸は大胸筋周辺にSCモードで当てるとリフトアップ、バストアップ効果があります。

- ①コンセントを繋ぎ、パワー調節ダイヤルを回します。
- ②モード切り替えボタンで照射モードを選びます。
- ③VIOの場合は緑のヘッドカバー、美顔モードの場合は赤いヘッドカバー、その他の脱毛はヘッドカバーを外しま。
- ④連射モードの場合はタッチパネルを押すと連射になります
- ⑤パワー調節ダイヤルをOFFにして、機械の音が消えたらコンセントを抜きます。

痛みが少なく・ジェルなし・連写機能付き




モモ専用モード



顔専用モード



SR美肌モード

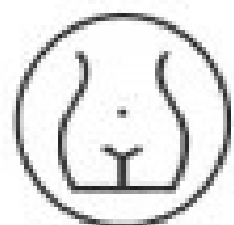


VIO専用モード



ワキ専用モード




腕専用モード

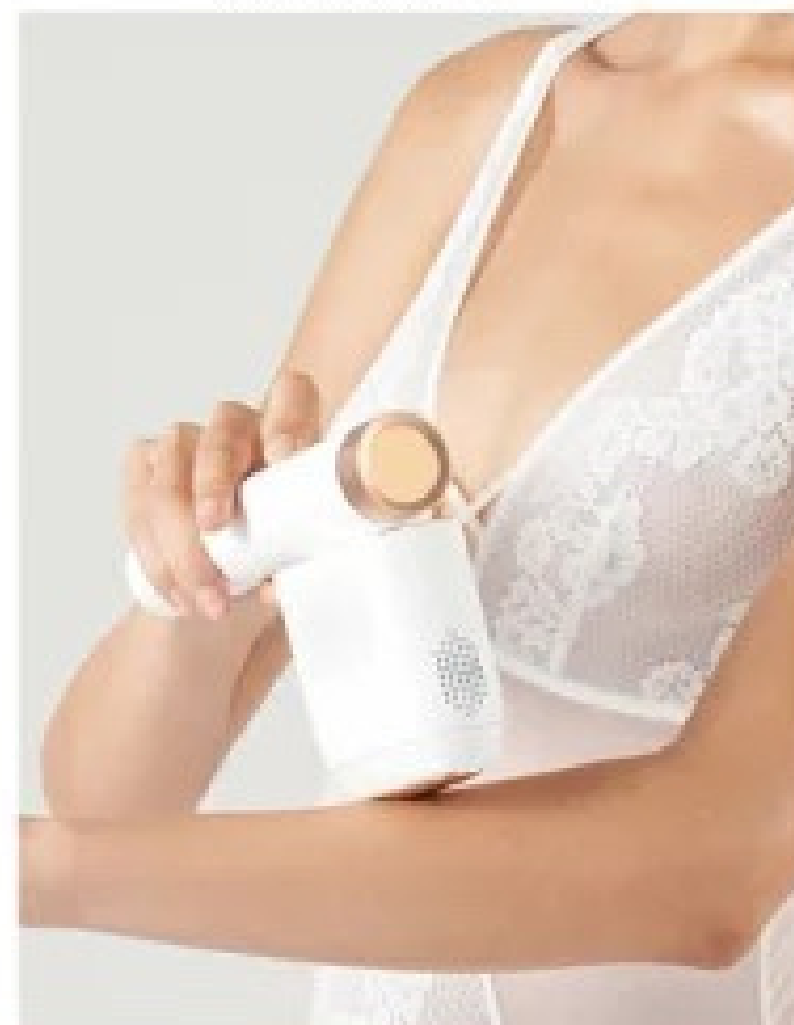

8週間で効果を実感

使用頻度

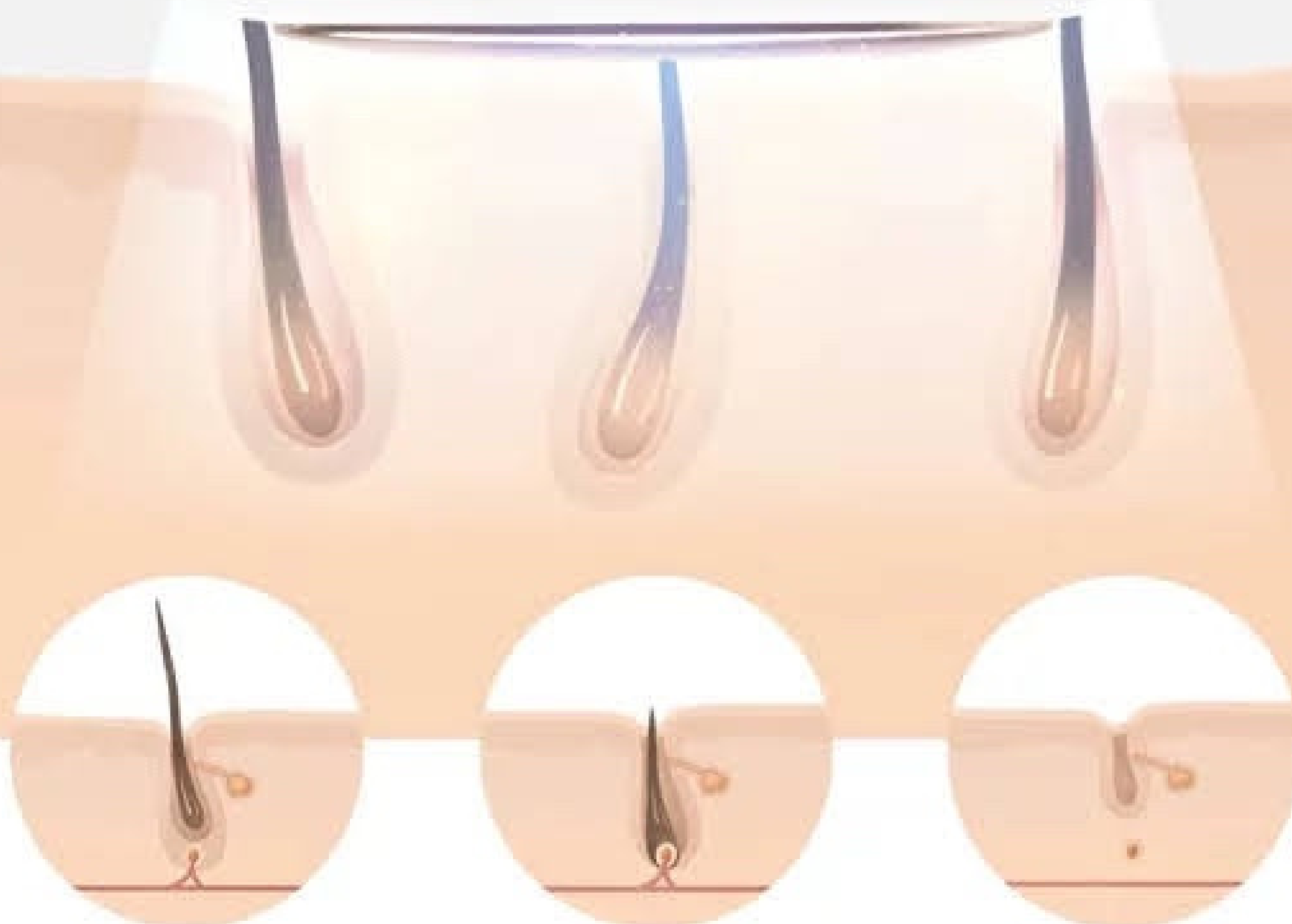

1~2週目

(週に3回)

75%以上のムダ毛が減り、毛の成長が遅くなります。

3~4週目

(週に2回)

毛が細くなり、毛穴が引き締まり、目立たなくなります。

4~8週目

(週に1回)

ムダ毛が徐々に生えなくなります。お肌がツルツル。

※お手入れのスケジュールは個人の状況により異なります。

SCモードでコラーゲン生成！

肌のハリ・小じわ・ニキビなどの美肌効果
貧乳のバストアップ・垂れ乳のハリアップ効果

ムダ毛ケアも、**美肌**も、
これ一台で**W効果**を実感

BoSidinに搭載されたフォト美顔テクノロジーは、肌に有効な光をあてることで、肌トラブルの原因となるターゲットにダイレクトに反応し、コラーゲンなどのお肌に有効な成分を活性化させ、肌のハリ・くま・小じわ・つやなどを改善。また、肌本来のアンチエイジング能力を高め、血行促進、肌の表皮の再生などを促進できます。1日中メイク崩さない、滑らかで透明感のある肌に。



SR美肌美白専用
(3cm²)

※SR美肌モードは日常のスキンケアまたは脱毛後のスキンケアとしてご利用いただけます。照射する際はSR専用のカートリッジをつけ、SRモードで照射ください。SR美肌モードは2日あけてのご使用を勧めします。

冷却機能搭載でジェルなしでも痛みが少ない！

敏感肌なあなたへ 専門なDCD皮膚冷却装置付き

BoSidin独創なDCD皮膚冷却装置(ダイナミッククーリングデバイス)は光照射すると同時に冷却ガスを噴射し、皮膚の表面に5°Cの保冷層を形成させ、痛みを最大限に抑えることができます。また、照射後の瞬間冷却によって肌表面をきちんと守ります。今までサロン脱毛の痛みに耐えられず、途中で断念された敏感肌の方もお使いいただけます♪



ヘッド回転でどこでもフィット

照射ヘッド180°回転可能

革新な180度回転する照射ヘッドとワイドな照射面で、見えにくい脇や指などの細かい部分も一気にケアできます。

鼻の下や髪の毛の生え際などの場所もしっかりフィットし、お手入れがらくらく♪




1台で家族全員分の脱毛可能！

照射回数なんと**50万**発!!

全身脱毛約**500回**できます。

照射回数たっぷり使えるから、親子、友達、カップルでシェアして使用も全然足りません。しかもカウントディスプレイ搭載で、残り回数は目で見てわかります♪

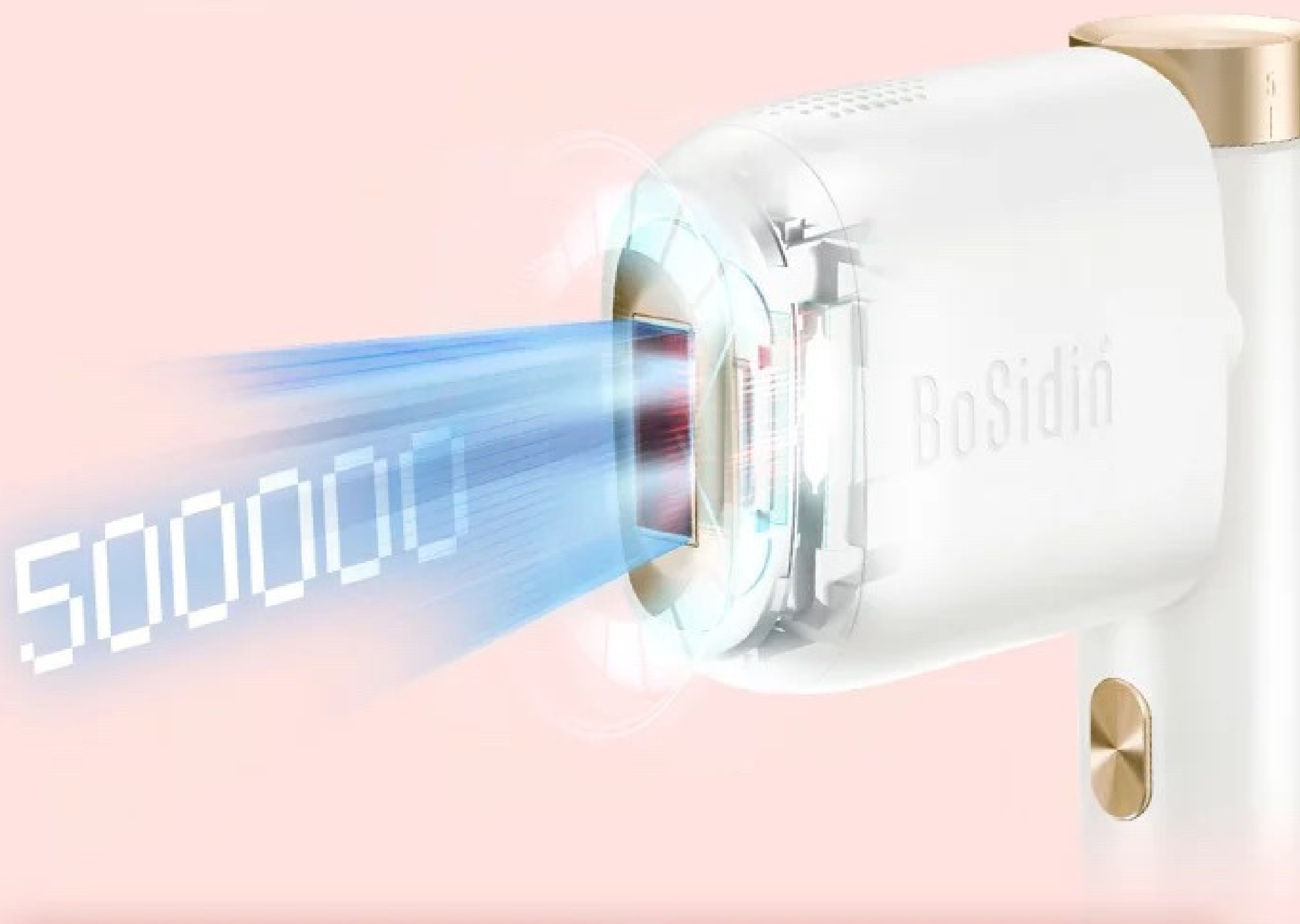



用途に合わせたカートリッジをセット！

